


生物制品产品解决方案 赋能药物发现和开发项目

用于生物制品项目开发的基于细胞的活性检测

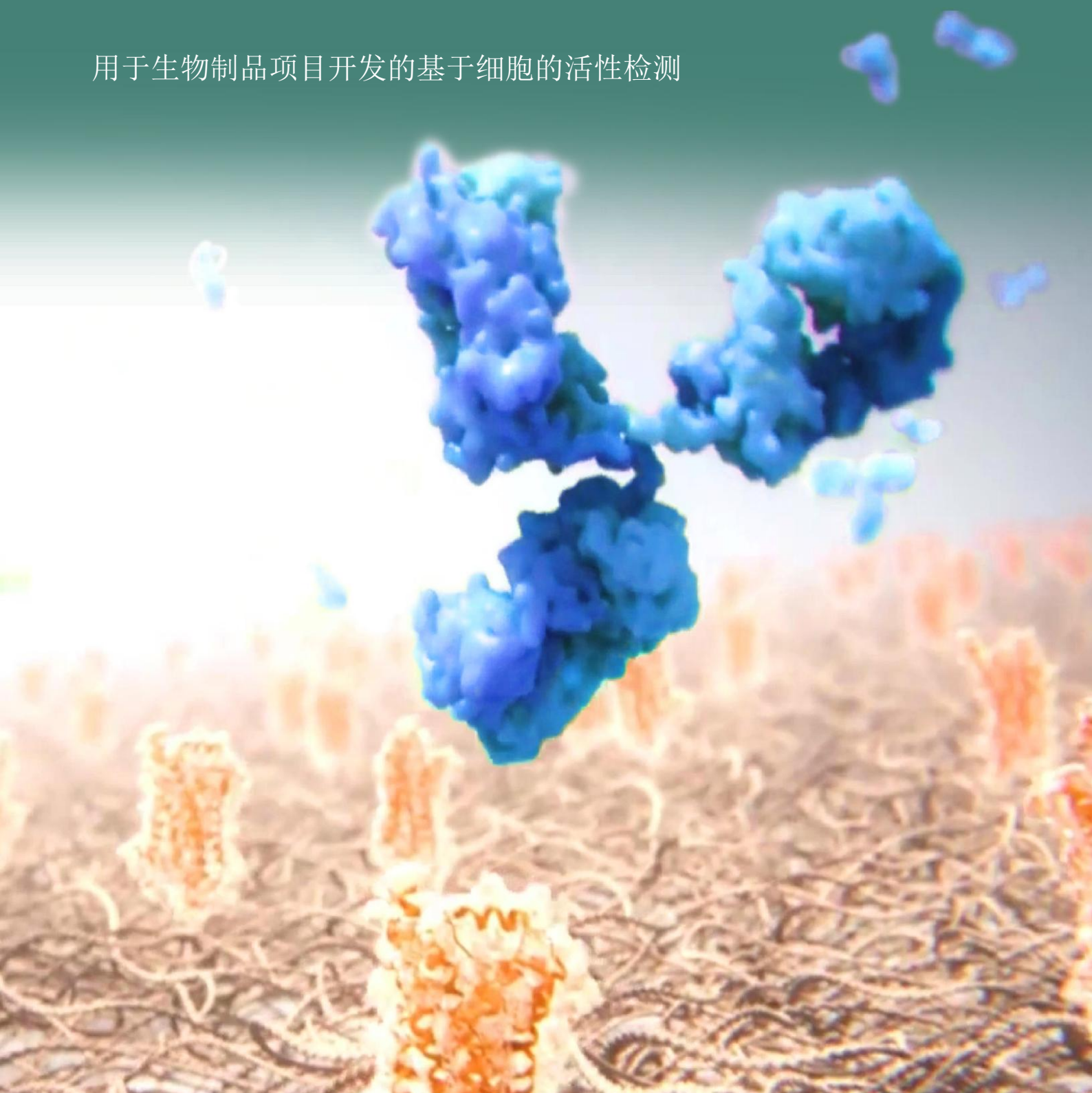

2026 年1月更新

用于生物制品项目开发的基于细胞的活性检测

从药物发现到QC批次放行，加速生物制品开发

用于生物制品的生物活性检测2

 Biosimilars, Biobetters 药物项目适用的经确认的生物活性检测2

 用于药物开发的基于靶点或MOA的生物活性检测3

 定制开发生物活性检测4

信号通路报告基因检测5

 免疫肿瘤学解决方案和能力6

 用于免疫检查点调节剂的PathHunter®检测6

 免疫检查点簇集细胞株7

 Early Access免疫检查点细胞株7

KILR®细胞毒性检测8

 KILR®CD16 效应细胞8

 用于ADCC的KILR®即用型生物活性检测试剂盒8

 用于ADCP的KILR®即用型生物活性检测试剂盒8

 KILR®模型靶细胞: 稳转细胞株试剂盒9

 KILR®模型靶细胞: 稳转细胞Pool试剂盒9

白细胞介素/细胞因子受体检测10

定制解决方案14

有限使用许可协议15

联系方式15

用于生物制品的生物活性检测

Biosimilars, Biobetters 药物项目适用的经确认的生物活性检测

这些即用型生物活性检测已针对特定药物进行了优化和确认，可将检测方法开发周期缩短至少6个月。简单易用的检测方案能够快速交付结果，可用于质量控制（QC）批次放行及全球多场所方法转移。

药物名称	经过确认 (Qualified with)	分子作用机制	检测方式
Panitumumab	Vectibix®	Anti-EGFR mAb	EGFR/ErbB2 Dimerization
Pertuzumab	Perjeta®	Anti-HER2-dimerization mAb	ErbB2/ErbB3 Dimerization
Tocilizumab	Actemra®	Anti-IL6 or Anti-IL6RA Drugs	IL6RA/IL6ST Dimerization
Adalimumab	Humira®	Anti-TNF α mAb	I κ B Degradation
Bevacizumab	Avastin®	Anti-VEGFA mAb	VEGFR2 (KDR) Dimerization
Ranibizumab	Lucentis®	Anti-VEGFA mAb	VEGFR2 (KDR) Dimerization
Rituximab		Direct Target Cell Death	ADCC
Darbepoetin Alfa	Aranesp®	EPOR Agonist	EpoR/EpoR Dimerization
Epoetin Alfa	Recombinant hEpo	EPOR agonist	EpoR/EpoR Dimerization
Follitropin alfa	Gonal-F	FSHR agonist	cAMP Accumulation
Somatotropin, Somatropin	Recombinant hGH	GHR agonist	SH2 Recruitment
Tirzepatide	Mounjaro®	GIPR Agonist	cAMP Accumulation
Exenatide	Byetta®	GLP1R agonist	cAMP Accumulation
Liraglutide	Victoza®	GLP1R agonist	cAMP Accumulation
Semaglutide	Ozempic®	GLP1R Agonist	cAMP Accumulation
Tirzepatide	Mounjaro®	GLP1R Agonist	cAMP Accumulation
Anakinra	Kineret®	IL-1RA (Inhibits IL-1)	IL1R/IL1RAP Dimerization
Insulin	USP Insulin	INSRb agonist	SH2 Recruitment
Insulin Glargine	USP Insulin	INSRb agonist	SH2 Recruitment
Insulin Lispro	USP Insulin	INSRb agonist	SH2 Recruitment
Pembrolizumab	Keytruda®	PD-L1-induced PD-1 Signaling	SHP Recruitment
Teriparatide	Forteo®	PTHr agonist	cAMP Accumulation
Sargramostim	Leukine®	Recombinant GM-CSF (CSFR2 agonist)	CSF2RB/CSF2R Dimerization
Aflibercept	Eylea®	VEGF-Trap	VEGFR2 (KDR) Dimerization

用于药物开发的基于靶点或MOA的生物活性检测

基于靶点或MOA的即用型生物活性检测方法已使用参照配体完成了优化。此类检测方法可直接应用于作用机制或靶点相同的研发项目，进行表征、效价测试和检测中和抗体。

靶点	分子作用机制	检测方式
AGTR1	AGTR1 Agonists	β -Arrestin Recruitment
AGTRL1	AGTRL1 Agonists	β -Arrestin Recruitment
AM2	CLR Agonist	β -Arrestin Recruitment
BDKRB2	BDKRB2 Agonists	β -Arrestin Recruitment
C5AR1	Anti-ligand (anti-C5a)	β -Arrestin Recruitment
CCR2	Antagonist drugs	β -Arrestin Recruitment
CD19, CD20, CD38	Cytotoxicity	ADCP
CD19, CD20, CD38	Cytotoxicity	ADCC
CNR1	CNR1 Agonists	β -Arrestin Recruitment
CXCR5	Antagonist drugs	β -Arrestin Recruitment
Exendin-4	Agonist drugs	β -Arrestin Recruitment
FGFR4- β -Klotho	Agonist drugs	SH2 Recruitment
GCGR	GCG Agonist	cAMP Accumulation
GHSR	Agonist drugs	β -Arrestin Recruitment
GIPR	GIP Agonist	cAMP Accumulation
GLP-1R	GLP-1 Agonist	cAMP Accumulation
GLP-1R	GLP-1 Agonist	β -Arrestin Recruitment
GLP-2R	GLP-2 Agonist	β -Arrestin Recruitment
GPBAR1	Agonist drugs	cAMP Accumulation
HER2	Cytotoxicity	ADCC
IGF1R	Agonist drugs	SH2 Recruitment
IL10RA/IL10RB	Anti-receptor (IL-10RA) drugs	IL10RA/IL10RB Dimerization
IL-15	Endogeneous Receptor Activation	IL-15 Signaling
IL17RA/IL17RC	Anti-IL-17 mABs	IL17RC/IL17RC Dimerization
IL1RL1/IL1RAP	IL-33 Antagonists	IL1RL1/IL1RAP Dimerization
IL2RB/IL2RG	IL-15 Agonist	IL2R β /IL2R γ Dimerization
IL2RB/IL2RG/IL2RA	Modified agonists; anti-IL2 drugs	IL2RB/IL2RG/IL2RA Hetero-oligomerization

IL31RA/OSMRb	Anti-ligand (IL-31); Anti-receptor drugs	IL31RA/OSMRb Dimerization
IL6R/IL6ST	Anti-IL-6 mAbs	IL6RA/IL6ST Dimerization
IL7R/IL2RG	IL-7 Agonists	IL7R/IL2RG Dimerization
LHCGR	Agonist drugs	cAMP Accumulation
MC4R	Antagonist drugs	β -Arrestin Recruitment
MCHR1	Agonist drugs	β -Arrestin Recruitment
MRGPRX2	Agonist drugs	β -Arrestin Recruitment
NPY2R (cAMP)	Agonist, Antagonist drugs	cAMP Accumulation
NPY2R (β -Arrestin)	Agonist, Antagonist drugs	β -Arrestin Recruitment
Parathyroid Hormone (PTH) Receptor	Agonist drugs	β -Arrestin Recruitment
PDGFRA	Antagonist drugs	SH2 Recruitment
PDGFRB	Antagonist drugs	SH2 Recruitment
SIRPa (-CD47)	Agonists, Antagonist drugs	SH2 Recruitment
SSTR2	Agonist drugs	β -Arrestin Recruitment
TrkA-p75	Agonist drugs	SH2 Recruitment
TrkB-p75	Antagonist drugs	SH2 Recruitment
TrkC	Antagonist drugs	SH2 Recruitment
VIPR2	Agonist drugs	β -Arrestin Recruitment

定制开发生物活性检测


其他可进行定制开发的靶点

以下的生物活性检测目前正在开发中，同时也可根据客户需求提供个性化定制开发服务。如您需要申请以下生物制品的定制化的生物活性检测，请联系我们 CustomerService_DRX_China@cpt.eurofinscn.com

药物名称或靶点	分子作用机制	检测方式
Denosumab	Anti-RANKL mAb	NF- κ B transcriptional reporter
CXCR2	Agonist drugs	β -Arrestin recruitment
CALCRL-RAMP3	Agonist drugs	β -Arrestin recruitment
MC1R	Agonist drugs	β -Arrestin recruitment
CSF1R/CSF1R	Antagonist drugs	Ligand-mediated Receptor Dimerization
AXL	Agonist drugs	SH2 recruitment
A549	Anti-TNF α mAb	I κ B degradation

信号通路报告基因检测

PathHunter 信号通路报告基因检测是稳转的单克隆细胞株，使用PathHunter酶片段互补（EFC）技术，监测特定信号通路的激活情况。每个稳转细胞株被设计为表达一个合成的DNA报告基因构建体，其中包含一个特定信号通路的转录因子应答元件，驱动ePL标记的报告蛋白的表达。激活的信号通路诱导ePL标记的报告蛋白的表达，通过添加含有EA的检测试剂，使两个酶片段互补，产生一个活性酶，水解底物产生化学发光信号。

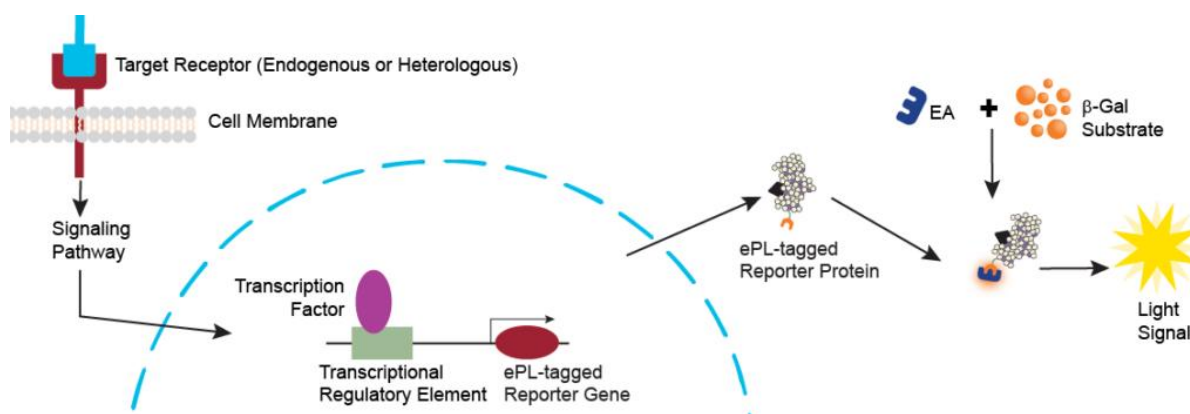


信号通路	靶点受体	细胞背景
NFAT	-	Jurkat
NF-κB	-	U2OS
NF-κB	CD27	HEK293
NF-κB	RANK	U2OS
NF-κB	-	HEK293
IL18R1		U2OS
IFNγ	-	HEK293
STAT3	IL-11	HepG2
STAT3	-	HepG2
TREM1-DAP12	-	Jurkat
	IL-2	REH
	IL-3	U937
	IL-7	REH
	IL-15	REH
	LPS	THP-1
	PD-1	Jurkat
	TSLP	REH

免疫肿瘤学解决方案和能力

用于免疫检查点调节剂的PathHunter®检测

这些基于靶点的生物活性检测试剂盒，使用经过验证的稳转细胞株，并用已上市的对照配体完成了确认 (Qualified)。

免疫检查点信号通路细胞株

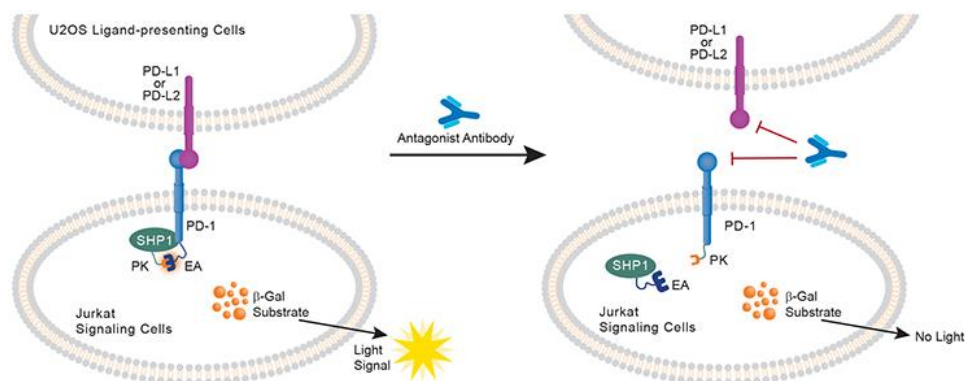


靶点	MOA	细胞背景
BCMA	Internalization	U2OS
BCMA	Reporter	K562
BTLA	Signaling	Jurkat
CD137	Signaling	Jurkat
CD200	Ligand-Presenting	U2OS
CD200R	Signaling	Jurkat
CD28	Signaling	Jurkat
CD33	Internalization	U2OS
CD47	Ligand-Presenting	U2OS
CD86	Ligand-Presenting	U2OS
CTLA4	Signaling	Jurkat
HVEM	Ligand-Presenting	U2OS
ICOS	Signaling	Jurkat
LAG3	Cytotoxicity	U2OS
LAIR1	Signaling	Jurkat
mCD80	Ligand-Presenting	U2OS
mCTLA4	Signaling	Jurkat
mPD-1	Signaling	Jurkat
mPD-L1	Ligand-Presenting	U2OS
NIK	Signaling	Jurkat
OX40	Signaling	Jurkat
PD-1(SHP-1)	Signaling	Jurkat
PD-1(SHP-2)	Signaling	Jurkat
PD-1	Reporter	
PD-1	Cytotoxicity	
PD-L1	Ligand-Presenting	U2OS
PD-L1	Cytotoxicity	

PD-L2	Ligand-Presenting	U2OS
PD-L2	Cytotoxicity	
Siglec9	Internalization	U2OS
SIRPα(SHP-1)	Signaling	Jurkat
TIM3	Cytotoxicity,	
TIM3/TIM3	Dimerization	U2OS
VISTA/VISTA	Dimerization	U2OS

免疫检查点簇集细胞株

FcγRIa	Clustering	U2OS
FcγRIIa	Clustering	U2OS
FcγRIIIa	Clustering	U2OS
FcγRIIb	Clustering	U2OS
mFcγRIIb	Clustering	U2OS

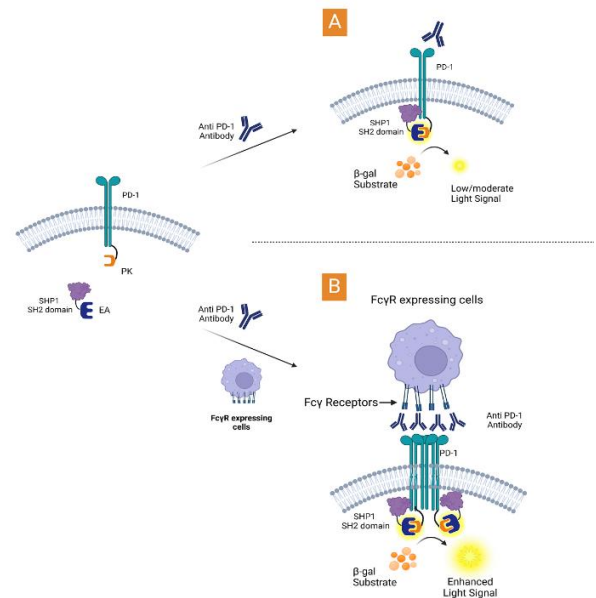

Early Access免疫检查点细胞株

Early Access细胞株是指因目前没有标准品或药物可以对这些细胞株进行全面验证，所以暂无法作为完整产品发布的Assay，但仍可供客户进一步开发与其分子相关的检测。

Target Receptor	
PD-1/CD28	PD-L1/TIM3
PD-1/CEACAM1	mPD-1/mCTLA4
PD-1/CTLA4	mPD-1/mLAG3
PD-1/LAG3	mPD-1/mTIGIT
PD-1/PD-L1	TIGIT/LAG3
PD-1/TIGIT	TIM3/CEACAM1
PD-L1/CTLA4	


KILR®细胞毒性检测

在任何细胞杀伤检测中均可使用KILR®效应细胞和KILR®生物活性检测试剂盒来测量靶细胞的死亡。可使用现成的KILR®细胞株目录产品，或用可转导几乎任何细胞株的逆转录病毒颗粒制备自己的稳转KILR®细胞株。

KILR®CD16 效应细胞


产品名和规格
CD16 Effector Cells, 1 Vial
CD16 Effector Cells, 5 Vials

用于ADCC的KILR®即用型生物活性检测试剂盒

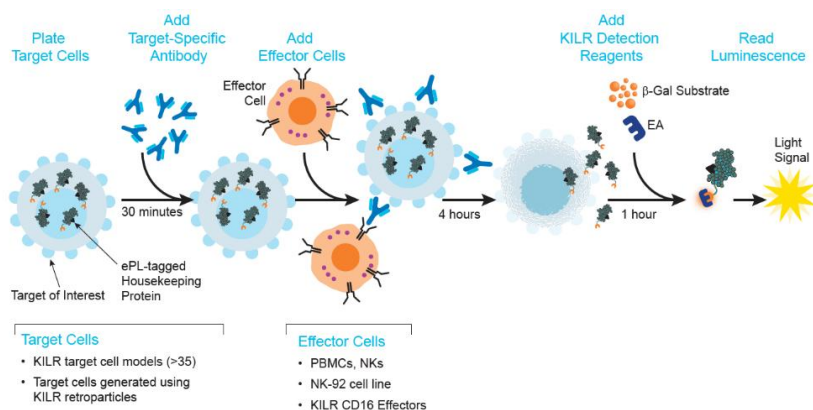

Bioassay Kit 名称	肿瘤细胞类型	抗原	测试药物
KILR Daudi ADCC Bioassay Kit	Burkitt' s lymphoma	CD19; CD20; CD38	Rituximab
KILR NCI-N87 ADCC Bioassay Kit	Gastric cancer	EGFR; HER2; B7-H3	Trastuzumab
KILR Raji ADCC Bioassay Kit	Burkitt' s lymphoma	CD19, CD20, CD38	Rituximab

用于ADCP的KILR®即用型生物活性检测试剂盒

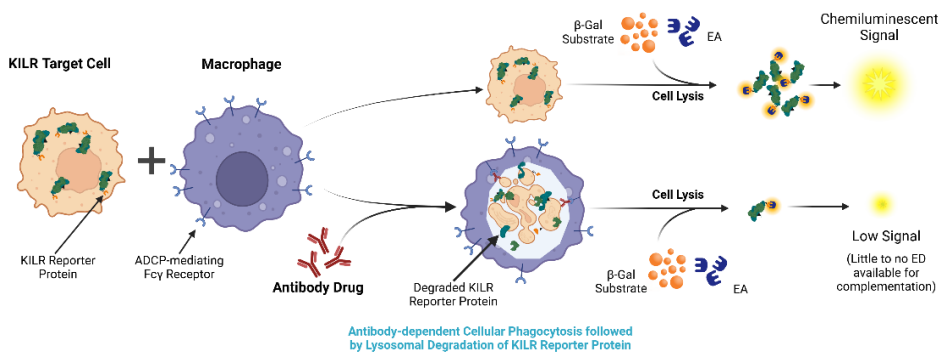

Bioassay Kit 名称	肿瘤细胞类型	抗原	测试药物
KILR Daudi ADCP Bioassay Kit	Burkitt' s lymphoma	CD19; CD20; CD38	Rituximab
KILR Raji ADCP Bioassay Kit	Burkitt' s lymphoma	CD19, CD20, CD38	Rituximab

KILR®模型靶细胞: 稳转细胞株试剂盒

产品类型	细胞种类	靶点/抗原	测试药物
ARH77	B-lymphoblast (Leukemia)	CD20	Rituximab
Jurkat	T lymphocyte	LAG-3	--
Jurkat	T lymphocyte	PD-1	--
Jurkat	T lymphocyte	TIM3	--
U2OS	Osteosarcoma	PD-L2	--
U2OS	Osteosarcoma	EGFR	Cetuximab
U2OS	Osteosarcoma	PD-L1	--

KILR®模型靶细胞: 稳转细胞Pool试剂盒

产品类型	细胞种类	靶点/抗原	测试药物
4T1	Mouse mammary gland carcinoma	--	--
A-498	Renal cell carcinoma (kidney)	EGFR	Cetuximab
A549	Lung cancer	EGFR	Cetuximab
BT-474	Mammary ductal carcinoma	HER2; HER3	Trastuzumab
CCRF-CEM	T lymphocyte (CCR4+)	CCR4	--
COLO-205	Colorectal cancer	Gpa33	--
Daudi	Burkitt' s lymphoma	CD19; CD20; CD38	Rituximab
DU-145	Prostate carcinoma	EGFR; HER2	Cetuximab
EL4	Mouse T lymphocyte line	--	--
H322	NSCLC	EGFR; B7-H3	Cetuximab
HCT-116	Colorectal carcinoma	--	--
HepG2	Hepatocellular carcinoma	Glypican	--
HL-60	Promyeloblast	CD33, CD38	Gemtuzumab
HT1080	Fibrosarcoma	NY-ESO-1 (CTAG1A)	--
Hut78	Cutaneous T lymphocyte	GITR; CD30	--
Jurkat	T lymphocyte	--	--
K562	Bone Marrow; Chronic Myelogenous Leukemia (CML)	--	--
MDA-MB-231	Breast cancer	CD73; PD-L1; B7-H3	--
NCI-H292	NSCLC (Squamous)	EGFR	Cetuximab
NCI-N87	Gastric cancer	EGFR; HER2; B7-H3	Trastuzumab
PANC-1	Pancreatic cancer	EGFR	Cetuximab
Raji	Burkitt' s lymphoma	CD19; CD20; CD38	Rituximab
Ramos	Burkitt' s lymphoma	CD19; CD20	Rituximab
RPMI 8226	B lymphocyte	GITR; BCMA	--
SKBR3	Breast adenocarcinoma	--	Trastuzumab
SK-MEL-28	Melanoma	CD73	--
SK-MEL-5	Melanoma	CD73	--
SKOV3	Ovarian adenocarcinoma	HER2; PD-L1	Trastuzumab
SR	Lymphoblast	CD25; CD30	--
T2 (174 xCEM.T2)	Lymphoblast	--	--
THP-1	AML	CD33	--

白细胞介素/细胞因子受体检测

配体诱导的受体二聚化是受体激活的早期功能步骤，代表了靶向细胞因子受体的药物活性的最近端的、功能性的读数。PathHunter®细胞因子受体检测是基于细胞的、即用型均相检测方法，可通过细胞表面受体-受体相互作用来监测和测量受体活化。这些检测使用简单的添加-读取的操作方法，在不到24小时内即可获得快速、可重复的结果。

靶点	检测机制	稳转细胞株试剂盒	eXpress Kit	Bioassay Kit
ACVR1/ACVR2	二聚化	✓		
ACVR1B/BMPR2	二聚化	✓	✓	
ACVR1C/ACVR2	二聚化	✓	✓	
ACVR1C/ACVR2B	二聚化	✓	✓	
ACVRL1/ACVR2	二聚化	✓	✓	
ACVRL1/ACVR2B	二聚化	✓	✓	
ACVRL1/BMPR2	二聚化	✓	✓	
BMPR1A/ACVR2	二聚化		✓	
BMPR1A/ACVR2A	二聚化	✓		
BMPR1A/ACVR2B	二聚化	✓		
BMPR1A/BMPR2	二聚化	✓	✓	
BMPR1B/ACVR2A	二聚化	✓	✓	
BMPR1B/ACVR2B	二聚化	✓		
BMPR1B/BMPR2	二聚化	✓		
c-MET/c-MET	二聚化	✓		
CSF1R/CSF1R	二聚化	✓	✓	
CSF2RB/CSF2R	二聚化	✓		✓
CSF2RB/CSF2RA	二聚化	✓	✓	
EGFR/EGFR	二聚化	✓	✓	
EGFR/ErbB2	二聚化	✓	✓	
EGFR/ErbB3	二聚化	✓		
EpoR/EpoR	二聚化	✓	✓	✓
ErbB2/ErbB3	二聚化	✓		
ErbB2/ErbB4	二聚化	✓	✓	
ErbB4/ErbB4	二聚化	✓	✓	
FGFR3(G380R)/ FGFR3(G380R)	二聚化	✓		
FGFR3/FGFR3	二聚化	✓		
IFNAR1/IFNAR2	二聚化	✓		
IFNGR1/IFNGR2	二聚化	✓	✓	
IFNRL1/IL10RB	二聚化	✓	✓	
IFN γ	信号通路报告基因	✓		
IL10RA/IL10RB	二聚化	✓	✓	✓
IL11R/IL6ST	二聚化	✓		
IL12RB1/IL12RB2	二聚化	✓	✓	
IL15 (IL2R β /IL2R γ)	二聚化	✓		✓
IL17RA/IL17RB	二聚化	✓		

IL17RA/IL17RC	二聚化	✓	✓	✓
IL17RA/IL17RC (U2OS)	二聚化	✓	✓	
IL17RD/TNFR2	二聚化	✓	✓	
IL18	信号通路报告基因	✓		
IL18R1/IL18RAP	二聚化	✓	✓	
IL1R/IL1R	二聚化	✓		✓
IL1R1/IL1RAP	二聚化	✓	✓	
IL1R1/ILRAP	二聚化	✓		
IL1RL1/IL1RAP	二聚化	✓	✓	✓
IL2	信号通路报告基因	✓		
IL2/IL2	二聚化	✓		✓
IL20R1/IL20R2	二聚化	✓		
IL20RA/IL10RB	二聚化	✓	✓	
IL20RA/IL20RB	二聚化	✓	✓	
IL21R/IL2RG	二聚化	✓	✓	
IL22RA/IL10RB1	二聚化	✓		
IL22RA1/IL10RB	二聚化	✓	✓	
IL23R/IL12RB1	二聚化	✓	✓	
IL27RA/IL6ST	二聚化	✓		
IL2RB/IL2RG	二聚化	✓	✓	
IL2RB/IL2RG/IL2RA	二聚化	✓	✓	✓
IL31RA/OSMRb	二聚化	✓		✓
IL3RA/CD131	二聚化	✓		
IL4R/IL13RA1	二聚化	✓	✓	
IL4R/IL2RG	二聚化	✓	✓	
IL5RA/CSF2RB	二聚化	✓	✓	
IL6R/IL6ST	二聚化	✓		✓
IL6RA/IL6ST	二聚化	✓	✓	✓
IL7	信号通路报告基因	✓		
IL7R/CRLF2	二聚化	✓	✓	
IL7R/IL2RG	二聚化	✓	✓	✓
IL9R/IL2RG	二聚化	✓		
LEPR/LEPR	二聚化	✓		
OSMR/IL6ST	二聚化	✓	✓	
OSMRb/IL31R	二聚化	✓		
OSMRb/IL31RA	二聚化	✓	✓	
TGFBR1/ACVR2	二聚化	✓	✓	
TGFBR1/ACVR2B	二聚化	✓	✓	
TGFBR1/TGFBR2	二聚化	✓	✓	
TGFBR1/TGFBR2/ENG	二聚化	✓		
TGFBR1A/ACVR2A	二聚化	✓		
TPOR/TPOR	二聚化	✓		
TSLP	信号通路报告基因	✓		

细胞趋化因子受体（属于GPCR） Assay列表

靶点	检测机制	稳转细胞株试剂盒	eXpress Kit	Bioassay Kit	一次性冻存细胞	膜制品
CCR1	cAMP & 钙离子	✓			✓	
CCR1	受体内吞	✓	✓			
CCR1	β-Arrestin	✓				
CCR1	结合/GTPγS 功能					✓
CCR10	cAMP & 钙离子	✓			✓	
CCR10	受体内吞	✓	✓		✓	
CCR10	β-Arrestin	✓	✓		✓	
CCR2	β-Arrestin	✓	✓	✓		
CCR2	cAMP & 钙离子	✓			✓	
CCR2	受体内吞	✓	✓			
CCR2	结合/GTPγS 功能					✓
CCR3	cAMP & 钙离子	✓			✓	
CCR3	β-Arrestin	✓	✓			
CCR4	cAMP & 钙离子	✓			✓	
CCR4	受体内吞	✓	✓			
CCR4	β-Arrestin	✓	✓			
CCR5	cAMP & 钙离子	✓	✓		✓	
CCR5	受体内吞	✓	✓			
CCR5	β-Arrestin	✓	✓			
CCR5	结合/GTPγS 功能					✓
CCR6	cAMP & 钙离子	✓	✓		✓	
CCR6	受体内吞	✓	✓			
CCR6	β-Arrestin	✓	✓			
CCR6	结合/GTPγS 功能					✓
CCR7	cAMP & 钙离子	✓	✓		✓	✓
CCR7	受体内吞	✓				
CCR7	β-Arrestin	✓	✓			
CCR8	cAMP & 钙离子	✓			✓	
CCR8	β-Arrestin	✓	✓			
CCR8	结合/GTPγS 功能					✓
CCR9	cAMP & 钙离子	✓			✓	
CCR9	β-Arrestin	✓	✓			
CCR9	结合/GTPγS 功能					✓
CCRL1	β-Arrestin	✓				
CCRL2	β-Arrestin	✓	✓			
CX3CR1	cAMP & 钙离子	✓	✓		✓	
CX3CR1	β-Arrestin	✓	✓			
CX3CR1	结合/GTPγS 功能					✓
CXCR1	cAMP & 钙离子	✓			✓	
CXCR1	结合/GTPγS 功能					✓
CXCR1 (IL8RA)	cAMP & 钙离子	✓	✓		✓	
CXCR1 (IL8RA)	受体内吞	✓				


CXCR1 (IL8RA)	β-Arrestin	✓	✓			
CXCR2 (IL8RB)	cAMP & 钙离子	✓	✓		✓	✓
CXCR2 (IL8RB)	受体内吞	✓	✓			
CXCR2 (IL8RB)	β-Arrestin	✓	✓			
CXCR2 (IL8RB)	结合/GTPγS 功能					✓
CXCR3	cAMP & 钙离子	✓	✓		✓	✓
CXCR3	受体内吞	✓	✓			
CXCR3	β-Arrestin	✓	✓			
CXCR3	结合/GTPγS 功能					✓
CXCR4	cAMP & 钙离子	✓	✓		✓	✓
CXCR4	受体内吞	✓				
CXCR4	β-Arrestin	✓				
CXCR4	结合/GTPγS 功能					✓
CXCR5 (BLR1)	β-Arrestin	✓	✓	✓		✓
CXCR5 (BLR1)	cAMP & 钙离子	✓	✓		✓	✓
CXCR6	cAMP & 钙离子	✓			✓	✓
CXCR6	受体内吞	✓	✓			
CXCR6	β-Arrestin	✓	✓			
CXCR6	结合/GTPγS 功能					✓
CXCR7 (CMKOR1)	受体内吞	✓	✓			
CXCR7 (CMKOR1)	β-Arrestin	✓	✓			
CXCR7 (CMKOR1)	结合/GTPγS 功能					✓
cyno CXCR1	β-Arrestin	✓	✓			
cyno CXCR2	β-Arrestin	✓	✓			
mCCR1	β-Arrestin	✓				
mCCR2	β-Arrestin	✓	✓			
mCCR3	β-Arrestin	✓	✓			
mCCR4	β-Arrestin	✓	✓			
mCCR5	β-Arrestin	✓	✓			
mCCR6	β-Arrestin	✓	✓			
mCCR7	β-Arrestin	✓	✓			
mCCR8	β-Arrestin	✓				
mCCR9	β-Arrestin	✓	✓			
mCX3CR1	β-Arrestin	✓	✓			
mCXCR2 (IL8RB)	β-Arrestin	✓	✓			
mCXCR3	β-Arrestin	✓	✓			
mCXCR4	β-Arrestin	✓	✓			
mCXCR5 (BLR1)	β-Arrestin	✓	✓			
mCXCR6	β-Arrestin	✓	✓			
mCXCR7 (CMKOR1)	β-Arrestin	✓	✓			

定制化解决方案

Eurofins DiscoverX的定制检测开发（CAD）平台可根据您的需求提供量身定制的细胞株、重组蛋白和及经优化的检测方法，帮助您快速启动药物发现项目。我们已为全球多家公司的药物发现和开发项目提供数百项定制化检测方案，覆盖了药物筛选、先导化合物优化和生物分析检测开发等不同阶段，凭借深厚的行业理解与专业能力，为您的药物研发进程保驾护航。

访问网站了解更多 discoverx.com/custom_capabilities/custom-development-capabilities 或联系我们
CustomerService_DRX_China@cpt.eurofinscn.com

关键能力：

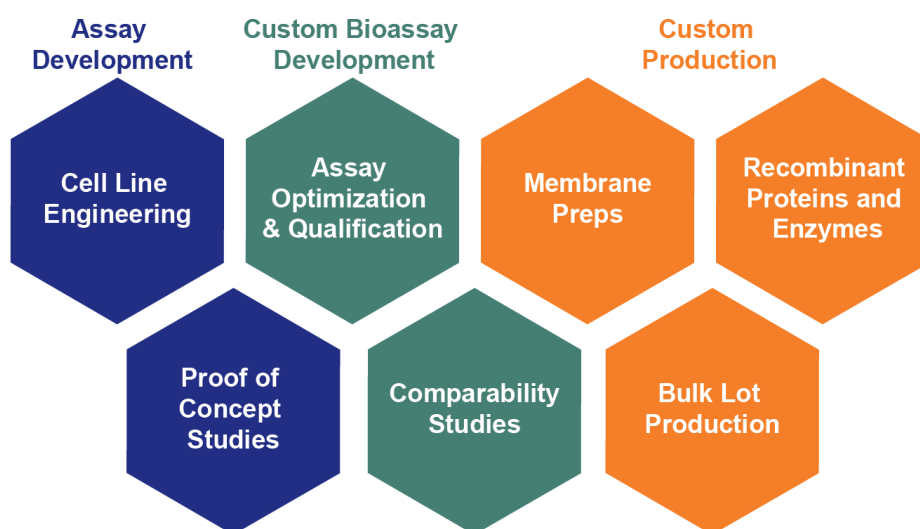

- **专业开发实力**
拥有二十多年的细胞检测开发、细胞株构建和重组酶开发经验及技术积累。
- **细胞株构建能力**
可提供外源性表达方法（组成型/诱导型）或基因编辑技术（例如使用CRISPR/Cas9的KO/KI）
- **高效协同合作**
由专职项目经理定期同步项目进展
- **完整解决方案**
同一团队提供定制化检测开发、药物筛选和分析等服务

有限使用许可协议

这些产品可能受到已颁发的美国和/或国外专利、专利申请的保护，并受到有限使用标签许可协议的约束。

请访问discoverx.com/license获取有限使用标签许可协议和有关该产品的商标信息。

联系方式

欧陆生物制品（上海）有限公司

地址：上海市闵行区陈行公路2168号18幢802-H室


邮箱：CustomerService_DRX_China@cpt.eurofinscn.com

微信服务号：欧陆DiscoverX



官方网站：<https://www.discoverx.com>

中文网站：<https://www.discoverx.com.cn>

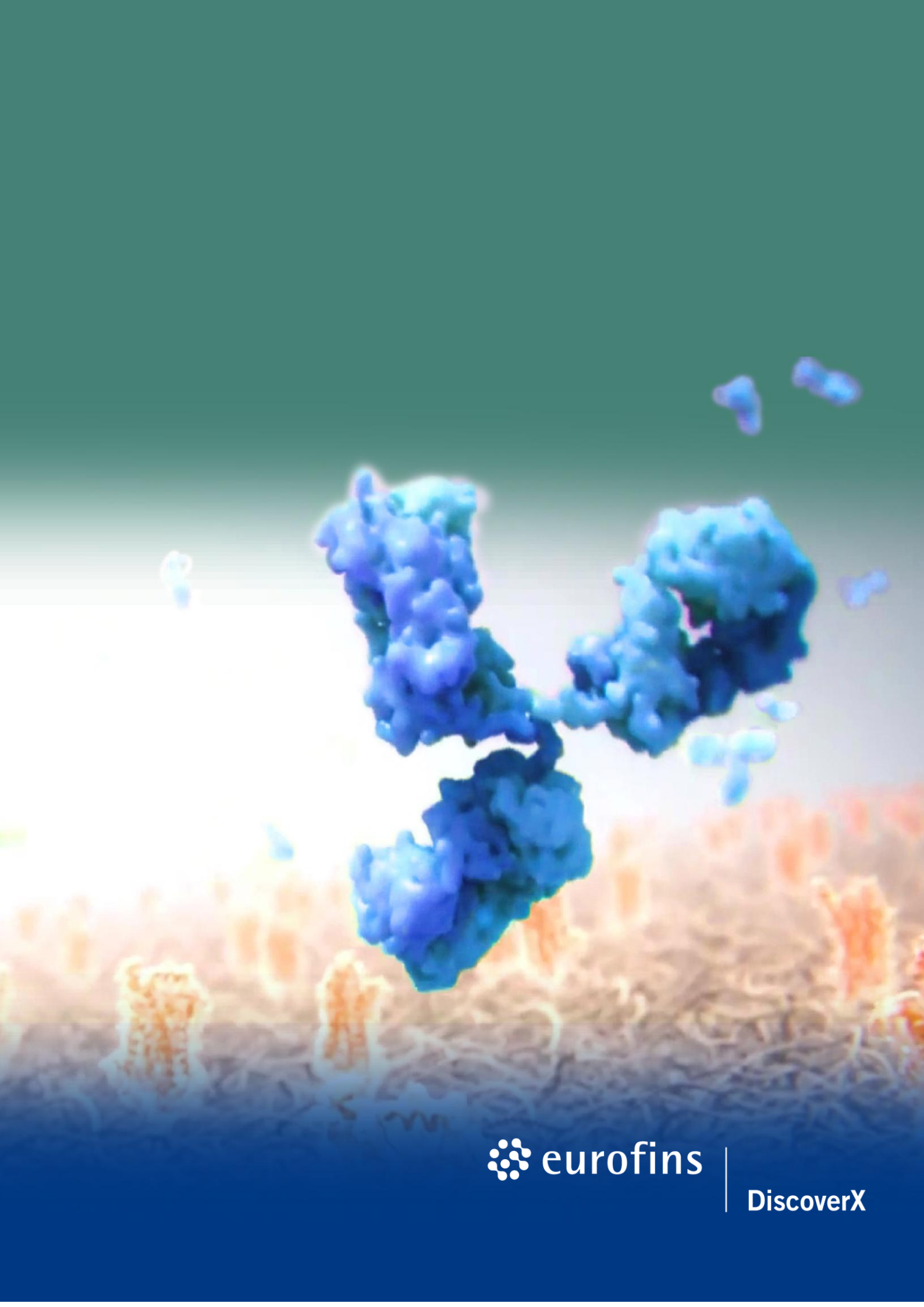

 eurofins

DiscoverX